

アナログ咬合器 パナデント モデル PCH/PSH

PANADENT



パナデント独自のモーションアナログが 曲線顆路をより生体に近い動きに再現します。

PCH カーブドインサイザルピン モデル



PSH ストレートインサイザルピン モデル



Motion Analogs

モーションアナログ

モーションアナログはDr.リーのタービンシステムから得た多くの生体情報に基づいて、コンピューターが削り出した三次元曲線の内面を持っていますので、それ自体が既に調節されたフォッサと言えます。

モーションアナログの完成まで

多くの症例から得られた貴重な情報がくみ込まれています。

パナデントのモーションアナログは、Dr.リーの開発したタービンシステムを用いて得られた下顎運動の分析データに基づいて製作されたもので、その顆路は生体に近い曲線顆路を持ち、咬合干渉をさける数値がもり込まれています。



① Dr.リーの開発によるタービンシステム
の顆頭運動描刻装置




② レジンブロックに顎運動をタービン
バーにより描刻



③ 側方運動時の平衡側の記録




④ 50人の患者の側方運動の矢状面記録

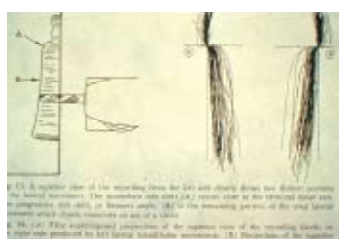

⑤ 同じ50人の患者の水平面記録



⑥ モーションアナログの顆路

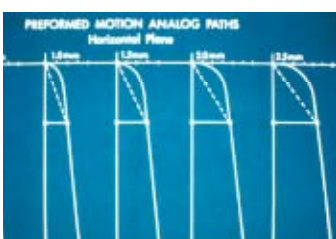

⑦ 直線顆路咬合器との顆路の比較



⑧ 完成されたモーションアナログ

Pana-Mount Face-Bow

パナマウント フェイスボウ



- コンプリートセット
- フェイスボウ 1個
- ナジオンリレーター 1個
- ヘックスレンチ 1個
- バイトフォーク アッセンブリー 2個
- マウンティング フィクスチャー 1個


Magna-Split II System

マグナスプリットII システム

マグネットを利用したスプリットキャストシステムで、模型の取り付け・取り外しを簡単に行うことができます。硬質プラスチック製の専用プレートに模型を取り付けるため、脱着による誤差を最低限に抑えます。



- セット内容
- マグナスプリット マウンティングプレート 2枚
- インデックスプレート 20枚

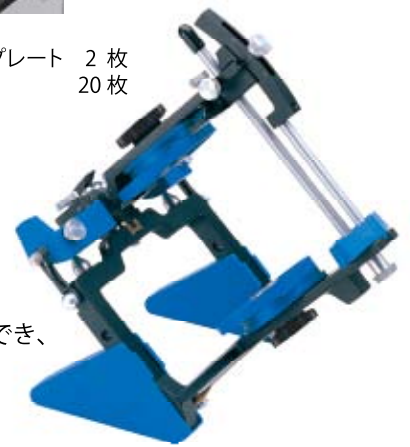

Articulator Support Legs

アーティキュレーター サポートレッグス


2ヶ1組

咬合器の下弓に装着することにより、咬合器を後ろへ傾けることができ、模型を正面から見ながら作業することができます。



アナログセレクター

簡単にイミディエートサイドシフト量を計測(チェックバイト法による)し、モーションアナログの選択と調節ができます。

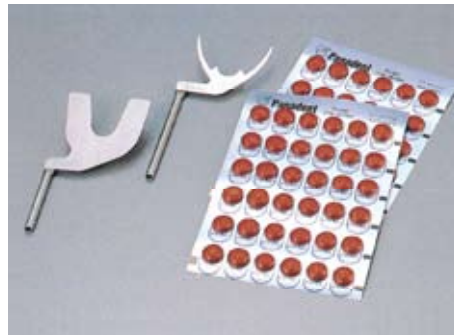

バイトフォーク バイトタブ

有歯顎用、無歯顎用
1セット180粒



パナバイトトレー

1セット20枚



プラスチック マウンティング プレート

10枚・20枚入り



マウンティング フィクスチャー

バイトフォークアッセンブリーを立てるスタンドとして使用します。



APIシステム Axis Position Indicator System

APIシステムを用いることにより、左右の顎頭の位置及び回転軸が治療の前後、および中心位と咬頭嵌合位との位置の比較で、どのように変化したかを計測できます。

Kois Dento-Facial Analyzer System

コイス デントフェイシャル アナライザー システム

審美と機能のための簡易型フェイスボウです。



■セット内容

- ① アナライザー・ボウ
- ② パーティカル・インディケーター・ロッド
- ③ アジャスタブル・プラットフォーム
- ④ ディスポーザブル・インデックス・トレー (10枚)
- ⑤ バイトタブ (6粒)



Kois Adjustable Platform

コイス アジャスタブル プラットフォーム

ディスポーザブル インデックス トレーで、採得された咬合平面の軌跡をパナデント咬合器に移行させたり、装着後の上顎模型の位置関係等を測定する際に使用します。



Golden Proportion Waxing Guides

ゴールデン プロポーション ワクシングガイド

中切歯歯冠幅に相当する7~10 mm間を0.5 mm刻みで個別評価するために使用する分布表セットです。

■別売品

ディスポーザブル・インデックス・トレー (20入り)
コイスシステム用 ディナーアダプター

届出番号 13B1X00188000051 一般医療機器(クラスI)
届出番号 13B1X00188000052 一般医療機器(クラスI)

●製品のデザイン・仕様は改良の為予告なく変更されることがあります。



株式会社 東京歯材社

<http://www.shizaisha.co.jp>

■本社 〒110-0001 東京都台東区谷中2-5-20

TEL.03-3823-7501 FAX.03-3823-7516

■商品センター 〒110-0004 東京都台東区下谷3-13-5 TYセンタービル6F

TEL.03-3874-5077 FAX.03-3874-5091