

M.A.P.D. Microscope Assisted Precision Dentistry



切れ味、

極まる

Sharp[®]point

シャーポイント マイクロサージェリーナイフ

マイクロサージェリーの為に開発されたナイフです。真空焼成で作製されたそのエッジは均一で堅牢。その切れ味は、切開部の組織に大きなダメージを与えません。歯科領域の歯周外科手術においても、微細な箇所の切開など、デリケートな作業に適しています。また、特殊なノンブレード処理により、マイクロスコープの照明を反射しません。

デリケートな作業に適しています。

シャープポイント マイクロサージェリーナイフ

SharpPoint®



クレセント ナイフ
(オムニトーム)

#74-1000 直、ハンドル付き
#74-5000 替刃



ミニクレセント ナイフ
(コブラ ヘッド)

#74-6910 曲、ハンドル付き



#74-1000

- 直、ハンドル付き 6本入り
認証番号：221ABBZX00033000


#74-6910

- 曲、ハンドル付き 6本入り
認証番号：221ABBZX00033000



#74-5000

- 直、替刃 6本入り
認証番号：221ABBZX00106000

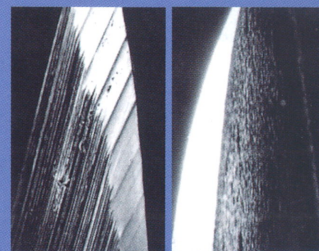

右：シャープポイント

オムニトーム #74-5000

左：一般のディスポーザブルの替え刃

シャープポイントのオムニトームはそのエッジ形成時にグラインダーを使用しません。写真のような一般のディスポーザブル替え刃とくらべ、非常に均一なエッジを持っています。これにより組織のダメージを最小限にとどめ、術後の創面の治療も良好な結果が望めます。

シャープポイント 替刃用ハンドル

#92-9003 シャープポイント替刃用のハンドルです。

- ステンレス製 長さ16cm
届出番号：13B1X00048000047



(製造販売業者 株式会社イナミ)

微細な治療に…

マイクロサージカル用 マイクロ インスツルメント

ブレードブレイカーホルダー

- 16cm
ステンレス
届出番号：13B3X10131000120



ルーペやマイクロスコープを使っの、歯周形成外科に使用することができるマイクロインスツルメントです。
厳しいドイツ基準をクリアーしたインスツルメントは、術者の手に馴染み、思いのままに微細でデリケートな手術を可能にします。

眼科用ブレードを把持し、
割って使用します。




フェザー® 眼科カミソリ

- 10mm巾×56mm長×0.1mm厚
特殊カーボン鋼 / アルミ箔包装
完全滅菌済

認証番号：219AABZX00216000
(製造販売元 フェザー安全剃刀株式会社)

マイクロニードルホルダー


- 曲 18cm
タングステンカーバイト・チップ
先端幅 1mm ステンレス
適応：6-0, 7-0, 8-0

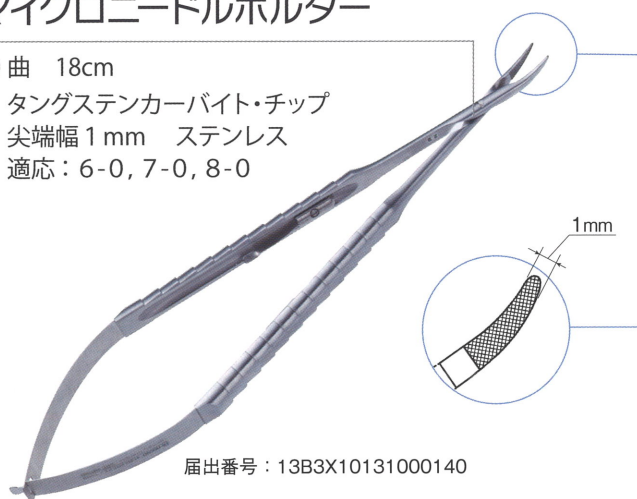

届出番号：13B3X10131000140

マイクロリングフォースeps

- 直 18cm
ステンレス

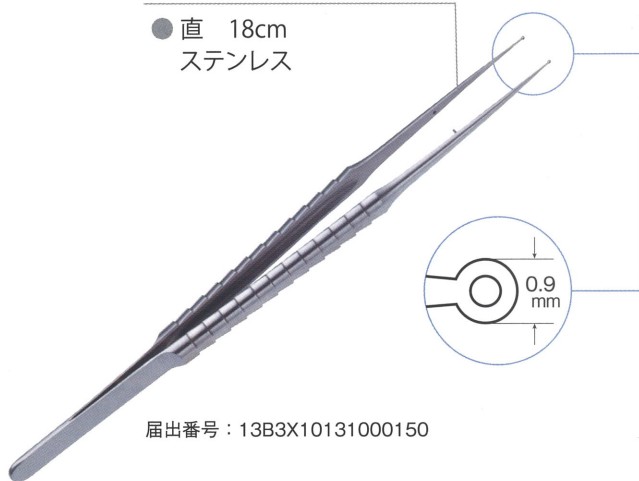

届出番号：13B3X10131000150

マイクロシザー

- 曲 18cm
ステンレス



届出番号：13B3X10131000170

マイクロタイイング フォースeps

- 直 18cm
ステンレス



届出番号：13B3X10131000160

エルゴノミック ミラーハンドル

- 長時間持っても
疲れにくい太めの
エルゴノミックグリップ



届出番号：13B3X10131000111

マイクロサージェリー用器材




針付ナイロン縫合糸

巻癖が少なく、なめらかなモノフィラメント糸を使用。
歯科手術に適した糸長20cmです。

- 7-0：針長12、角針、弱湾 (3/8)、糸長20cm、黒

1箱12本入り

承認番号：14200BZZ00096000（製造販売元 日腸工業株式会社）

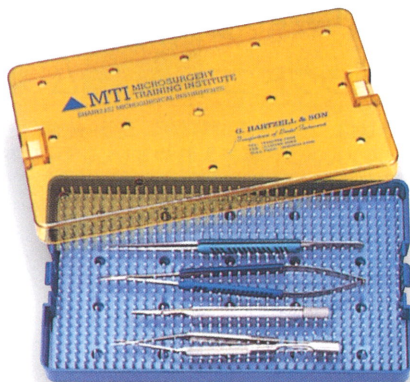


滅菌用プラスチックケース

MAPD 滅菌カセット

このカセットはオートクレープ可能なプラスチックで出来ており、チタン製のインスツルメントの滅菌にもお使い頂けます。
また、バットの中には叢生したシリコンの細かな突起があり、小さなインスツルメント類も傷つけることなくしっかり保持できます。

- サイズ L 253mm×152mm×16mm
- サイズ M 164mm×100mm×16mm
- サイズ S 151mm× 62mm×16mm
- サイズ SS 72mm× 38mm×16mm

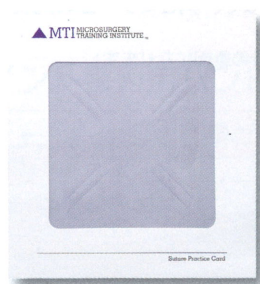

プラクティス シート

- マイクロ縫合練習用ラバーシート

毎日の臨床に欠かせない「ミラー」


視界スッキリ
表面反射ミラー

フロントサーフェイスミラー

先生の“目”となるミラーは、品質の高いものが要求されております。
MAPDフロントサーフェイスミラーは高い反射率をもった表面反射ミラーです。マイクロスコープやルーペを使ったMI治療には欠かせません。大きさや形状など用途にあったものをお選びください。

フロントサーフェイス Wサイドミラーヘッド

顕微鏡を使用する場合、ミラーホルダーや手指が視野に入り見にくくなる場合があります。Wサイドミラーは裏面も同じ表面反射ミラーですので、裏面を使って視野を遮らずに見ることが可能です。

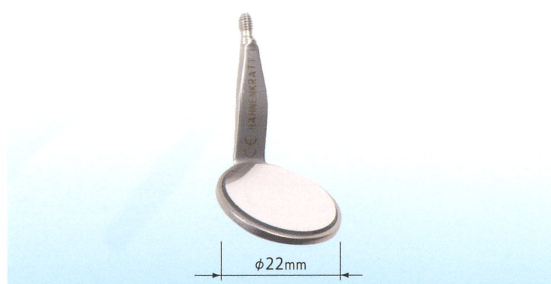


届出番号：13B3X10131000110

ウルトラリトラクト ダブルステム #4

ミラーのネックで口角を広げる場合に、無理な力が集中しないように、2本のステムによって患者さんの苦痛を和げ、術者には広い視野を確保します。

● 3ヶ入り（ドイツ製）

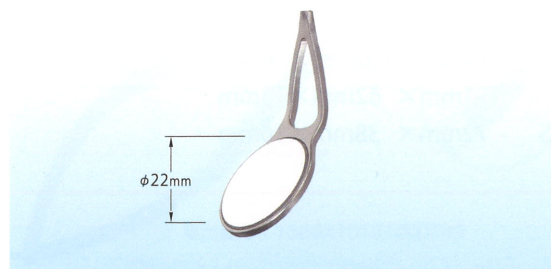


届出番号：13B3X10131000180

ウルトラFS

五酸化チタンと二酸化シリカを使った誘導体コーティングにより、シャープで明るい反射面を提供します。マイクロスコープ下の治療にもゴースト像のない明るい反射像を得ることができます。サイズは臼歯部にも無理なく使える、使い勝手のよい直径22ミリのミラーです。

● 3ヶ入り（ドイツ製）

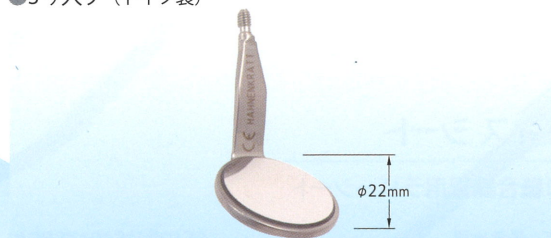


届出番号：13B3X10131000200

ミニミラー

通常のサイズより小さなミラーです。臼歯部など、スペースの少ない部位を見る際に変便利です。サイズは3種類。

● No.00（3ヶ入り） No.0（3ヶ入り）
No.1（3ヶ入り） アソート（3種各1ヶ入り）

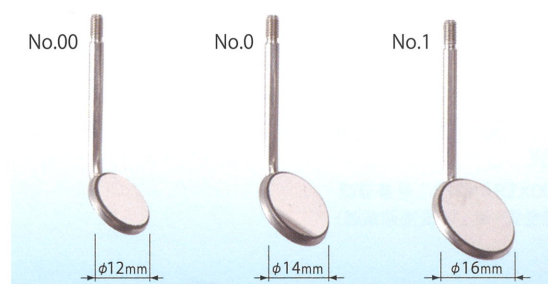


届出番号：13B3X10131000130

ウルトラリトラクト コントラスト #4

特殊なネック形状は、口角を広げながら、ミラーと歯牙とのあいだにインスツルメント等を入れやすいスペースを確保することが可能です。

● 3ヶ入り（ドイツ製）

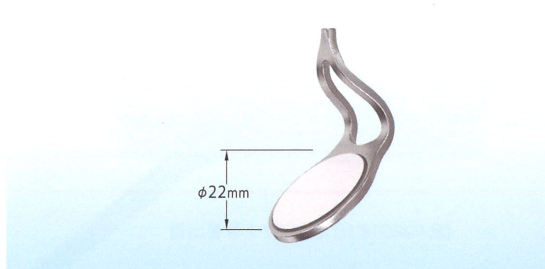


届出番号：13B3X10131000190

メタル パドルミラー

ステンレス製のミラーです。
ユニークなパドル（櫂）型の形状は咬合面や頬側からのミラービューを見るのに大変便利です。
ステンレス製ですので、柄とミラー部の角度を少し変えることも可能です。
（何度も曲げると破折の原因になります）

● 2ヶ入り（日本製）

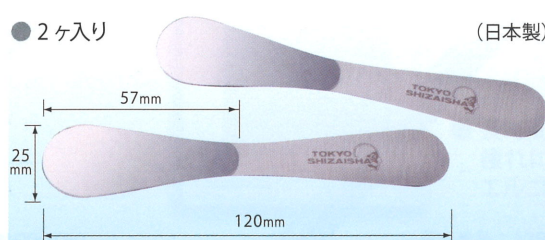

届出番号：13B3X1031500001

商品分類一覧

商品名	販売名	医療機器の分類	一般的名称	医療機器(承認・認証・届出)番号等	製造販売業者
クレセントナイフ オムニーム#74-1000	シャーポイントナイフ	管理医療機器(クラスII)	単回使用眼科用ナイフ	医療機器認証番号: 221ABB ZX00033000	株式会社イナミ
ミニクレセントナイフ コアラヘッド#74-6910	シャーポイントナイフ	管理医療機器(クラスII)	単回使用眼科用ナイフ	医療機器認証番号: 221ABB ZX00033000	株式会社イナミ
クレセントナイフ オムニーム#74-5000	シャーポイントナイフ(替刃式)	管理医療機器(クラスII)	単回使用眼科用ナイフ	医療機器認証番号: 221ABB ZX00106000	株式会社イナミ
シャーポイント替刃用ハンドル	シャーポイント替刃用ハンドル	一般医療機器(クラスI)	ナイフハンドル	医療機器届出番号: 13B1X00048000047	株式会社イナミ
フェザー眼科カミソリ	フェザー眼科カミソリ	管理医療機器(クラスII)	単回使用眼科用ナイフ	医療機器認証番号: 219AABZX00216000	フェザー安全剃刀株式会社
ブレードブレイカーホルダー	ブレードブレイカーホルダー	一般医療機器(クラスI)	ナイフハンドル	医療機器届出番号: 13B3X10131000120	株式会社東京歯材社
マイクロニードルホルダー	マイクロニードルホルダー	一般医療機器(クラスI)	持針器	医療機器届出番号: 13B3X10131000140	株式会社東京歯材社
マイクロリングフォーセプス	マイクロリングフォーセプス	一般医療機器(クラスI)	ピンセット	医療機器届出番号: 13B3X10131000150	株式会社東京歯材社
マイクロタイピングフォーセプス	マイクロタイピングフォーセプス	一般医療機器(クラスI)	ピンセット	医療機器届出番号: 13B3X10131000160	株式会社東京歯材社
マイクロシザー	マイクロシザー	一般医療機器(クラスI)	はさみ	医療機器届出番号: 13B3X10131000170	株式会社東京歯材社
エルゴノミックミラーハンドル	エルゴノミックミラーハンドル	一般医療機器(クラスI)	歯鏡	医療機器届出番号: 13B3X10131000111	株式会社東京歯材社
フロントサーフェイスWサイドミラーヘッド	フロントサーフェイスWサイドミラーヘッド	一般医療機器(クラスI)	歯鏡	医療機器届出番号: 13B3X10131000110	株式会社東京歯材社
ミニミラー	ミニミラー	一般医療機器(クラスI)	歯鏡	医療機器届出番号: 13B3X10131000130	株式会社東京歯材社
ウルトラリトラクト ダブルステム #4	ウルトラリトラクト ダブルステム #4	一般医療機器(クラスI)	歯鏡	医療機器届出番号: 13B3X10131000180	株式会社東京歯材社
ウルトラリトラクト コントラテム #4	ウルトラリトラクト コントラテム #4	一般医療機器(クラスI)	歯鏡	医療機器届出番号: 13B3X10131000190	株式会社東京歯材社
ウルトラFS	ウルトラFS	一般医療機器(クラスI)	歯鏡	医療機器届出番号: 13B3X10131000200	株式会社東京歯材社
メタルパドルミラー	メタルパドルミラー	一般医療機器(クラスI)	歯鏡	医療機器届出番号: 13B3X10131500001	株式会社東京歯材社
針付ナイロン縫合糸	針付ナイロン縫合糸	高度管理医療機器(クラスIII)	ポリアミド縫合糸	医療機器認証番号: 14200BZZ00096000	日腸工業株式会社



商品センター 〒110-0004 東京都台東区下谷3-13-5 ☎(03)3874-5077 FAX(03)3874-5091
 本社 〒110-0001 東京都台東区谷中2-5-20 ☎(03)3823-7501(代) FAX(03)3823-7516
<http://www.shizaisha.co.jp>