

# MOTION VISI-TRAINER V-1

## モーション ビジトレナー V-1


### Simple & Precise

モーションビジトレナーは赤外線LEDを使った下顎運動解析装置です。


下顎切歯点に付けたLEDの光を、2台のセンサーで3次元記録。専用ソフトをインストールしたWindowsPC上で下顎運動の切歯点における運動経路を、前頭面・矢状面で表示します。

また、その運動の時間軸表示や平均経路、運動経路やリズムの安定性もチャートにより判りやすく表示します。


商品名：モーションビジトレナー V-1  
MOTION VISI-TRAINER V-1  
システム内容：コントローラー、ヘッドギア、専用ソフト  
本体サイズ：W80 x H250 x D200mm  
本体重量：2 kg  
一般的名称：歯科用下顎運動測定器  
認証番号：第222AFBZX00130000号  
製造販売元：(株)フジタ医科器械  
〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-1  
発売元：(株)東京歯材社  
製品企画・ソフト作製：(有)東京歯科販売

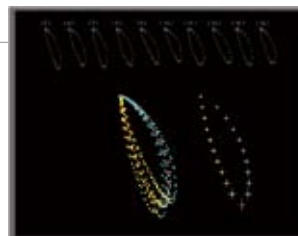


前頭面表示

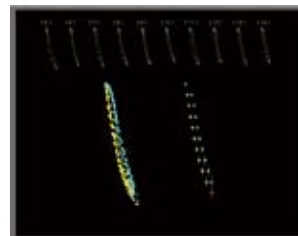


矢状面表示

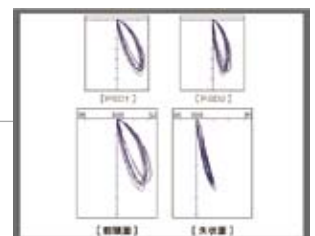

かさね合わせ表示

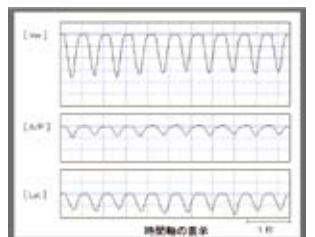

時間軸表示

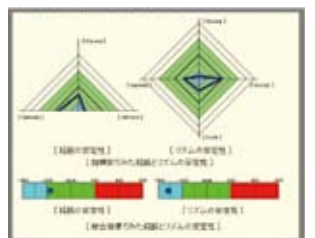

咀嚼機能評価

専用シーネと測定用LED