

BQE

エルゴダイナミック オペレーター

ワイドな座面とアームレストでしっかりサポート



エルゴソレックス オペレーター

コンパクトで機能的なシートで、スムーズにサポート



BQE




機能やスペースに合わせ、2種類 のサポートチェアをご提案

エルゴソレックス オペレーター


コンパクトながら多機能。
術者の体や診療内容に応じて、
ベストフィットのサポート。

アームレストの高さ、座面の角度、バックレストの上下・前後角度、
等の細やかな調整が可能です。座面の角度とバックレストは
固定にしてもフリーにしても使用できます。

コンパクトパッドで、
省スペースのサポートを

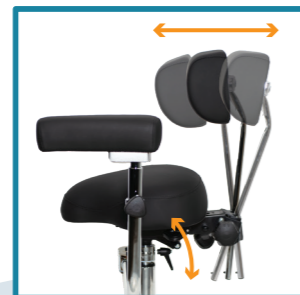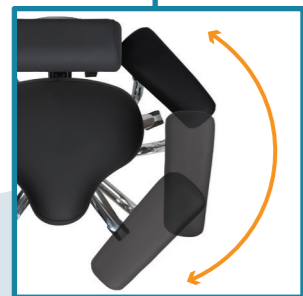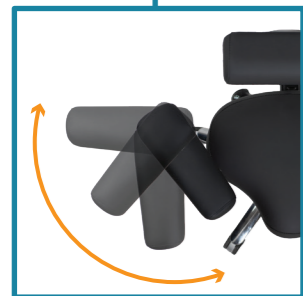

コンパクトなアームレストは上下、
前後、水平角度の調整が可能。術者に
とって最適な位置でサポートします。
省スペースな設計です。

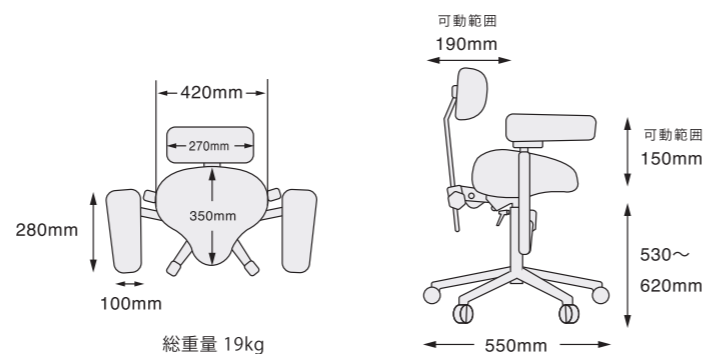


エルゴダイナミック オペレーター

エルゴダイナミックオペレーターは
治療中の術者の姿勢を
正しくサポートします。


椅子に深く座ると、背中側の座面が沈みこみ、同時にバックサポートが
前方に出て、術者の腰の位置を押さえます。これにより、骨盤が立った
良い姿勢を自然にとることができ、体への負担を軽減します。



ワイドパッドで
安定感のあるサポートを

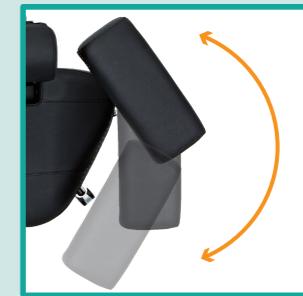

しっかりとしたアームサポートは、上下、
前後、回転の3つの動きにより術者の
最適な位置に置くことができ、特にマイ
クロスコープ使用時の腕から手の動きを
安定させます。

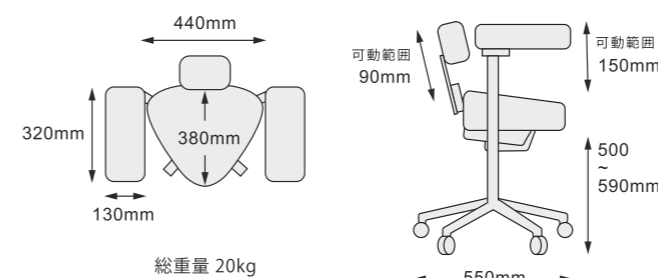

* シートの素材は合成皮革を使用し、消毒液などで拭くことが可能です。
アルコールフリーの消毒液をお勧めしております。 * この製品は組み立て式です。

* このカタログに掲載している内容は、予告なく変更される場合があります。2023.4 TR

