




フェザー®眼科用カミソリ

眼科用のカミソリとして従来からひげそり用安全剃刀替刃が利用されておりましたが、フェザーよりそれに代る眼科専用カミソリとして、滅菌済みアルミ箔包装のカミソリを発売いたしております。

この製品は特殊カーボン鋼を使用し、光輝焼入れを行い、完全な刃付を行っています。レーザーホルダーにより容易に思いのままにパンチング出来ます。尚、アルミ箔による完全包装で、且つ滅菌済みですから消毒の手間が省けます。

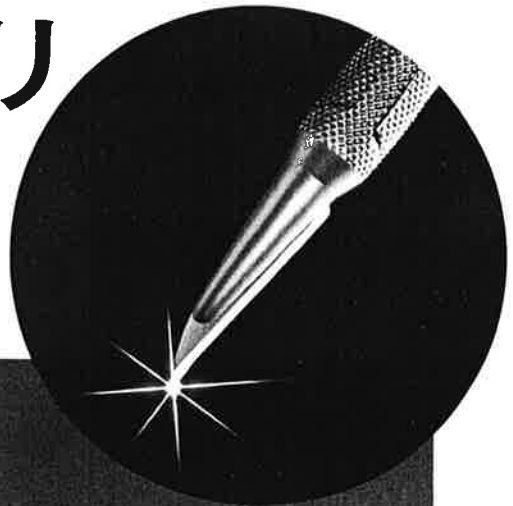

100枚入大函

20枚入小函

眼科用カミソリ
特殊カーボン(炭素)鋼

アルミ箔包装(滅菌済)

医療用具製造業許可番号 21BZ0082号

2006年7月20日現在

■特長

- 眼科用カミソリ専用で、レーザーホルダーに挟み容易にメス状にして使用出来ます。
- このカミソリは完全滅菌済ですので、滅菌の手間が不要です。
- カミソリ刃はカーボン鋼で、割り取り易く数回使用出来、非常に経済的です。
- 刃が鋭利で外眼手術、麦粒腫、内外反症顔面形成術、最近では白内障手術その他マイクロサージェリーの必需品になっています。


■仕様

- 替刃寸法：10%巾×56%長×0.1%厚
- 材 質：特殊カーボン(炭素)鋼
- 包装滅菌：アルミ箔包装完全滅菌済
- 価 格：


1箱(100枚入大函)	¥5,000	(税抜き)
-------------	--------	-------

フェザー眼科用カミソリ

原寸大

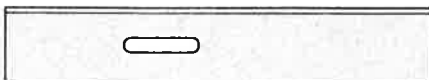

■取り扱い方法

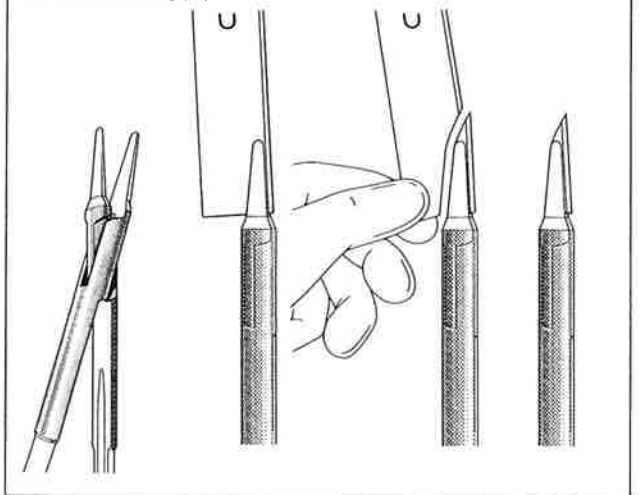

フェザー安全剃刀株式会社
メディカル部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-2-2
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8040
ホームページ <http://www.feather.co.jp/>

販売名:フェザー眼科カミソリ
製造販売認証番号:219AABZX00216000



品質・環境マネジメントシステム



この印刷物には、再生紙及び大豆油印刷インクを使用しています。