

**BQE**

## エルゴダイナミック オペレーター

ワイドな座面とアームレストでしっかりサポート



## エルゴソレックス オペレーター

コンパクトで機能的なシートで、スムーズにサポート



**BQE**




# 機能やスペースに合わせ、2種類のサポートチェアをご提案

## エルゴソレックス オペレーター


コンパクトながら多機能。  
術者の体や診療内容に応じて、  
ベストフィットのサポート。

アームレストの高さ、座面の角度、バックレストの上下・前後角度、  
等の細やかな調整が可能です。座面の角度とバックレストは  
固定にしてもフリーにしても使用できます。

コンパクトパッドで、  
省スペースのサポートを

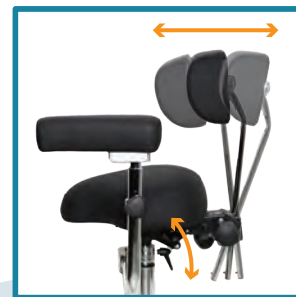

コンパクトなアームレストは上下、  
前後、水平角度の調整が可能。術者に  
とって最適な位置でサポートします。  
省スペースな設計です。

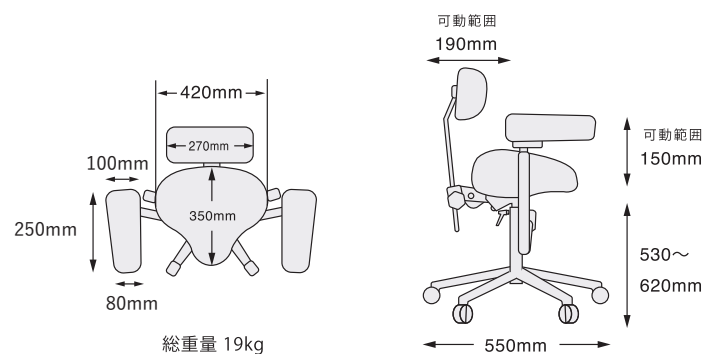


## エルゴダイナミック オペレーター

エルゴダイナミックオペレーターは  
治療中の術者の姿勢を  
正しくサポートします。


椅子に深く座ると、背中側の座面が沈みこみ、同時にバックサポートが  
前方に出て、術者の腰の位置を押さえます。これにより、骨盤が立った  
良い姿勢を自然にとることができ、体への負担を軽減します。



しっかりとしたアームサポートは、上下、  
前後、回転の3つの動きにより術者の  
最適な位置に置くことができ、特にマイ  
クロスコープ使用時の腕から手の動きを  
安定させます。

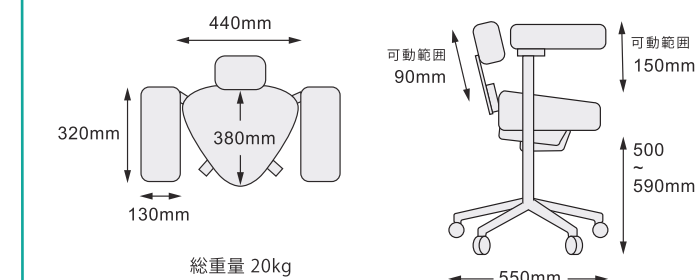

ワイドパッドで  
安定感のあるサポートを

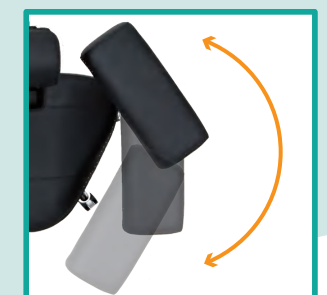

\* シートの素材は合成皮革を使用し、消毒液などで拭くことが可能です。  
アルコールフリーの消毒液をお勧めしております。 \* この製品は組み立て式です。

\* このカタログに掲載している内容は、予告なく変更される場合があります。2023.4 TR

株式会社 東京歯材社

本社 〒110-0001 東京都台東区谷中 2-5-20  
TEL. 03-3823-7501 FAX. 03-3823-7516

商品センター 〒110-0004 東京都台東区下谷 3-13-5 TYセンタービル 4階  
TEL. 03-3874-5077 FAX. 03-3874-5091 EMAIL info-web@shizaisha.co.jp

